


MARUTAKA ML  
Аппарат для омоложения  
лица и шеи

【Инструкция по эксплуатации】



## Описание

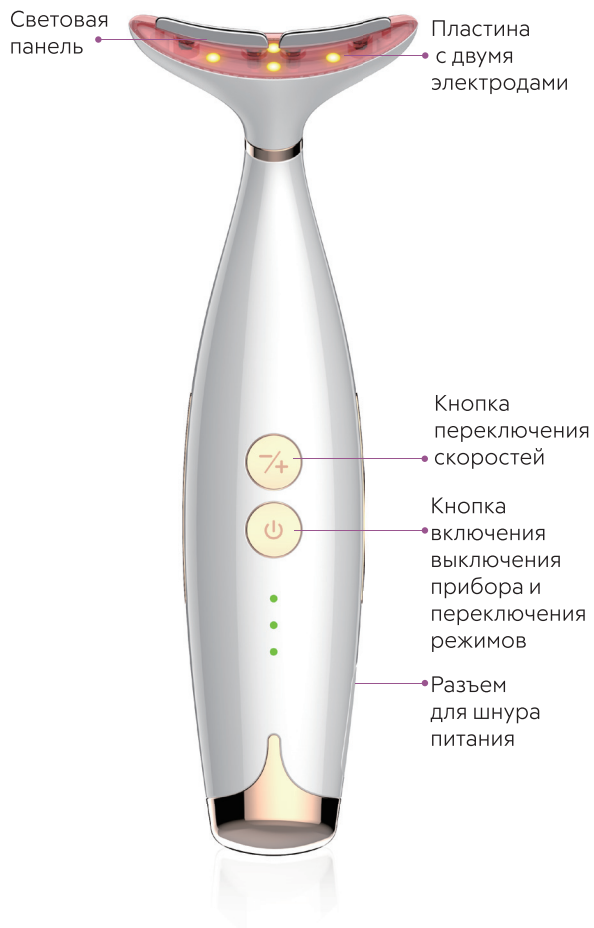

### Шаг 1

#### Режим RF-лифтинга. Первая скорость.



#### Примечание:

Перед началом использования нанесите на кожу пептидную сыворотку или любое косметическое средство гелеобразной онсистенции, чтобы избежать перегрева устройства.

### Шаг 2

#### Режим RF-лифтинга. Вторая скорость.




#### Примечание:

Рекомендуемое время воздействия на каждой скорости:  
- не более 15 минут для нормальной кожи  
- не более 10 минут для чувствительной кожи

### Шаг 3

#### Режим RF-лифтинга. Третья скорость.

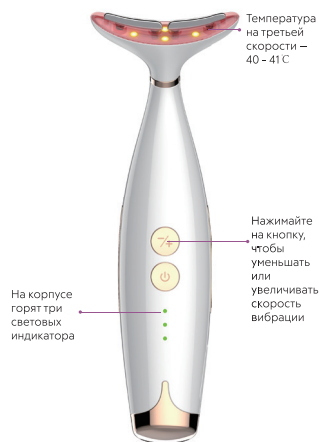

#### Примечание:

Если батарея прибора разрядилась в процессе работы, перед отключением раздастся звуковой сигнал.

### Шаг 4

#### Режим EMS




#### Примечание:

При работе в режиме EMS также необходимо использовать пептидную сыворотку или гелеобразное косметическое средство, чтобы процедура была максимально комфортной и эффективной. В противном случае может возникнуть легкое покалывание.

## Основные режимы:

**RF лифтинг:** Не так давно процедура RF-лифтинга была возможна только в салонах красоты. С развитием технологий приборы стали компактнее, появились модели для домашнего применения. Под действием радиочастоты волокна коллагена в коже разглаживаются, происходит рост нового здорового коллагена, значительно повышается плотность кожи.

**Микроток EMS:** высокоэнергичный импульс мгновенно улучшает проницаемость клеток кожи и способствует эффективному впитыванию средств по уходу за кожей. В результате кожа получает полезную щадящую нагрузку, что делает ее более эластичной и подтянутой, стимулируя клетку коллагена и способствует циркуляции крови.

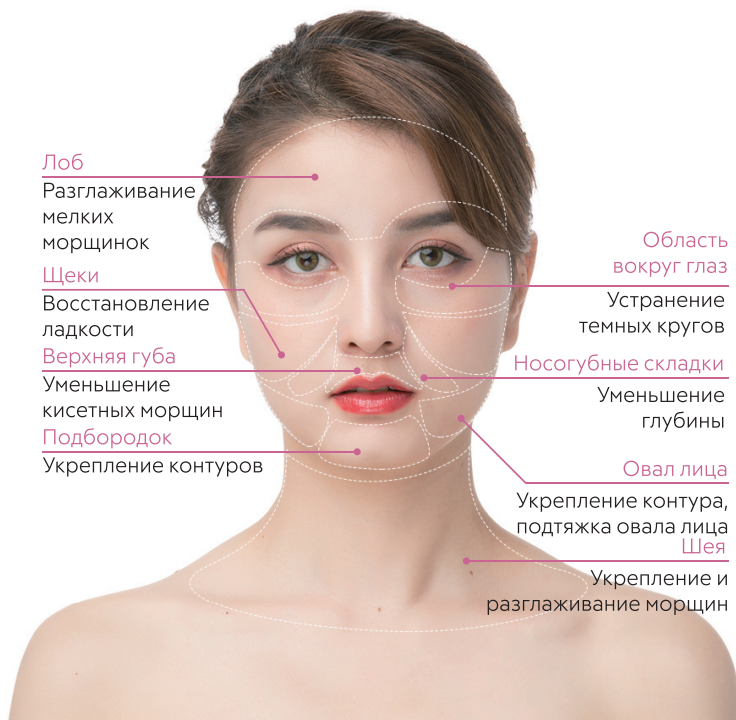

# 【Режимы работы】




**Важно!** Перед началом процедуры нанесите на кожу увлажняющий гель или другое жидкое косметическое средство для максимально комфортного и эффективного воздействия

## Принцип работы:

Во время RF-лифтинга радиочастота нагревает ткани, способствуя синтезу коллагена в дерме и укрепляя кожу. Микроток в режиме EMS воздействует на мышцы подкожной клетчатки, активизирует клеточный обмен, дополнительно способствует синтезу коллагена. В результате кожа выглядит подтянутой и уплотненной.

1  
One

## Подбородок

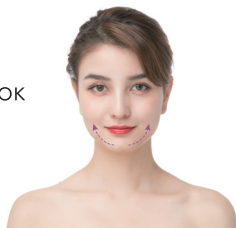

Выполняйте движения прибором снизу вверх

2  
TWO

## Область вокруг глаз



Медленно проводите прибором от внутреннего уголка глаза к виску

3  
Three

## Щеки



Начните выполнять движения прибором от уголка рта и медленно двигайтесь вверх

4  
Four

## Лоб



Медленно перемещайте прибор от бровей к линии роста волос, двигаясь строго снизу вверх

5  
Five

## Овал лица



Плотно прижав прибор к коже, выполняйте движения вверх по направлению к вискам

6  
Six

## Шея



Аккуратно водите прибором по шее от ключиц вверх к подбородку

## 【Как зарядить устройство】

1. Убедитесь, что прибор выключен.
2. Насухо вытрите все рабочие области.
3. Подключите устройство к адаптеру с напряжением или через USB-порт к ноутбуку, компьютеру или внешнему зарядному устройству.



4. В процессе зарядки мигает красный индикатор. Белый индикатор загорается, когда аккумулятор полностью заряжен.
5. После окончания зарядки отключите провод питания. Длительная зарядка негативно влияет на срок службы аккумулятора. В процессе зарядки корпус устройства может слегка нагреваться, что не влияет на работу прибора.
6. Если прибор не используется 3 месяца и более, рекомендуется время от времени проводить зарядку.

### Важно!

Отключите шнур питания, если прибор не используется в течение длительного времени. Храните в недоступном для детей месте. Храните в сухом месте вдали от батарей, электронагревательных приборов и солнечных лучей. После длительного хранения убедитесь, что прибор работает исправно. Для этого протестируйте его на руке.

## Очищение прибора и правила эксплуатации

1. Не мойте прибор. Попадание воды в устройство может привести к его поломке.
2. Протирайте рабочую область устройства салфеткой или бумажным полотенцем

Перед тем, как убрать устройство, убедитесь, что оно выключено. Храните прибор в специальном контейнере.





3. Для очищения прибора запрещается использовать концентрированный спирт, моющие средства и растворители, так как это может привести к поломке.

## Технические характеристики

Название товара	Аппарат для омоложения лица и шеи
Модель	MARUTAKA ML
Входное напряжение	DC5V
Максимальная мощность	8 W
Режимы	RF, микротоки EMS, вибромассаж
Емкость аккумулятора	1000MA
Время зарядки	3 часа
В режиме непрерывной работы	1 час
Вес нетто	120 гр
Размер аппарата	180 mm x 60 mm x 40 mm
Размер упаковки	202 mm x 85 mm x 70 mm

Немедленно прекратите работу в случае возникновения внештатной ситуации и обратитесь в службу поддержки.

## Советы и предостережения

 запрещено разбирать	Ни в коем случае самостоятельно не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте устройство, так как это может стать причиной удара током и пожара.
 отсоединение шнура питания от розетки	<p>При извлечении устройства из розетки не тяните за провод, так как это может привести к разрыву провода и удару током. Уловите свое</p> <p>Отсоединяйте шнур от источника питания, когда прибор не используется. Не делайте этого мокрыми руками, так как это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию и возгоранию.</p> <p>При малейших признаках неисправности (появлении специфического запаха, чрезмерном нагревании прибора во время зарядки) немедленно отключите устройство от сети и, не включая его, отнесите в ремонт.</p>
 не использовать!	<p>Не используйте прибор, если шнур питания поврежден, это может вызвать короткое замыкание, возгорание и поражение электрическим током.</p> <p>Не повреждайте и не перегибайте электрический шнур, так как это может привести к его разрыву.</p> <p>Не используйте удлинители для зарядки аппарата, так как это может привести к короткому замыканию, возгоранию, удару током или поломке прибора.</p>
 запрещено	Не допускайте использования прибора детьми. Храните прибор вдали от детей.

## Устранение неисправностей

Неисправность	Причина	Метод устранения
Прибор не включается	Низкий заряд батареи Недостаточно длительное удерживание кнопки включения	Зарядка прибора Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 2 секунд
Не ощущается тепло при контакте прибора с кожей	Кожа недостаточно увлажнена	Увлажните кожу пептидной сывороткой или другим уходовым средством. Выберите более высокую скорость работы прибора
Не включается функция вибромассажа	Не нажата кнопка переключения скоростей	Нажмите и удерживайте кнопку переключения
Не удается зарядить прибор	Неисправность или некорректное подключение кабеля	Извлеките USB-кабель из разъема и вставьте повторно Замените USB-кабель
Внезапное прекращение работы	Превышен лимит работы на одной скорости (10 минут) Низкий заряд батареи	При необходимости нажмите на любую кнопку, чтобы продолжить работу прибора Зарядите прибор

1. Гарантийный срок составляет ровно один год со дня приобретения прибора.
2. Бесплатная гарантия по гарантийному талону ограничивается неисправностями, вызванными производственным браком.
3. В следующих ситуациях, наступивших до окончания гарантийного срока, неисправности устраняются за счет покупателя:
  - а) Ущерб, вызванный несоответствующими инструкциями методом использования, обслуживания и хранения.
  - б) Ущерб, возникший в результате неправильной эксплуатации прибора (например, некорректное подключение к сети или падение).
  - в) Отсутствие гарантийного талона.
  - г) Информация о приборе, зарегистрированная по гарантии, не соответствует фактическим техническим характеристикам устройства.